

MODE D'EMPLOI


Appareil : Conductimètre « MD22016 »

Marque : PIERRON

Fonction :

Cet appareil, associé à une sonde conductimétrique, permet de mesurer la conductivité d'une solution.

Description :

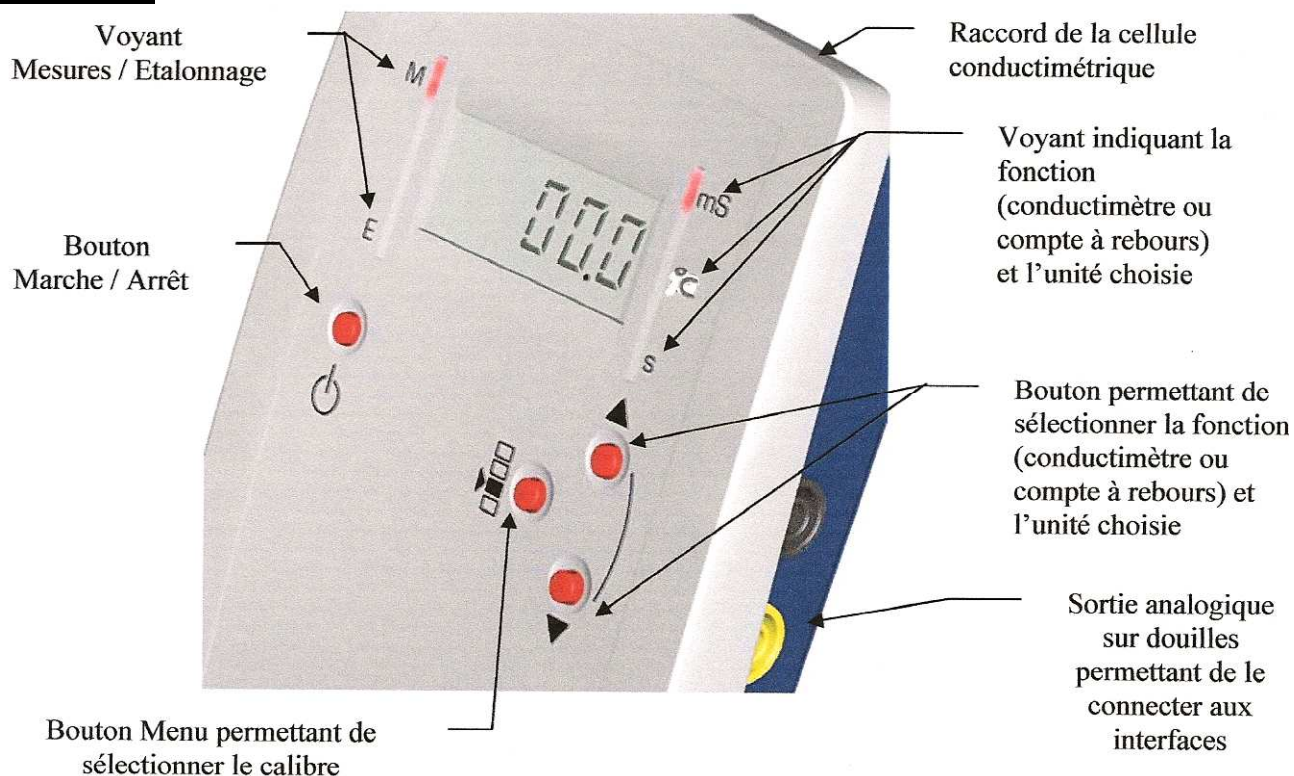

- Raccorder la sonde conductimétrique au conductimètre.
- Mettre sous tension le conductimètre en appuyant sur le bouton **Marche / Arrêt**.

Etalonnage :

- Rincer la sonde conductimétrique à l'eau déminéralisée et l'essuyer délicatement à l'aide d'un papier absorbant.
- Appuyer simultanément sur les boutons ▼ et ▲ jusqu'à ce que l'indication « REGL » apparaisse.
- Tremper la sonde conductimétrique dans une solution étalon de chlorure de potassium de conductivité connue : 0,084 mS/cm ou 1,413 mS/cm ou 12,88 mS/cm.
- A l'aide des boutons ▼ et ▲, sélectionner la valeur de la conductivité de la solution étalon.
- Valider par un appui bref sur le bouton **Marche / Arrêt**.
- Rincer à nouveau la sonde conductimétrique à l'eau déminéralisée et l'essuyer délicatement.

Mesure de la conductivité d'une solution :

- Tremper la sonde conductimétrique dans la solution dont on veut mesurer la conductivité.
- Par appuis successifs sur le bouton **Menu**, sélectionner :
 - la fonction conductimètre (voyant mS allumé),
 - le calibre (2 ou 20 ou 200 mS/cm).
- La valeur de la conductivité de la solution s'affiche alors.

Si l'indication - - - apparaît cela signifie que le calibre utilisé est trop petit.

Changer alors de calibre par appuis successifs sur le bouton **Menu**.

- Sortir la sonde conductimétrique de la solution, la rincer et l'essuyer délicatement.
- Eteindre le conductimètre en appuyant sur le bouton **Marche / Arrêt**.